

# 氣切管照護

## 一、氣切照護之目的

1. 保持呼吸道之通暢。
2. 預防傷口感染。

## 二、準備用物




1. 無菌生理食鹽水
2. 水溶性優碘
3. 無菌棉棒
4. 無菌 Y 型紗布
5. 氣切固定帶


## 三、氣切照護步驟



1. 洗手(圖一)。

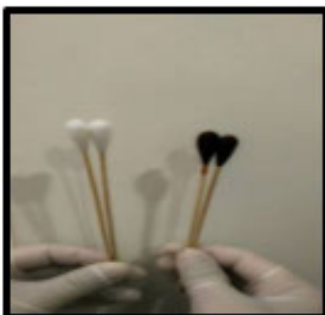

2. 取 4 支棉籤，2 支沾優碘、2 支沾生理食鹽水(圖二)。

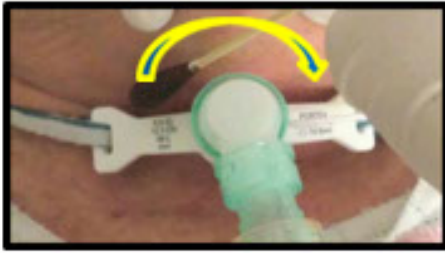

3. 優碘棉籤在上方及下方，從近端到遠端  
(停留 30 秒)，勿來回擦拭(圖三)。



4. 生理食鹽水棉籤在上方及下方，從近端  
到遠端擦拭(圖四)。



5. 取新 Y 紗布放置氣切處(可擦拭凡士  
林)(圖五)。



6. 更換氣切固定帶，鬆緊度以 1-2 指寬為  
佳(圖六)。

7. 洗手(圖一)。

## 四、內外管氣切消毒

### 內管型氣切套管 建議清潔方式

# 洗

## 步驟 1

取出用過的氣切管  
先以溫水沖洗  
水溫不超過攝氏65度  
去除管壁上的痰液。

# 刷

## 步驟 2

以雙氧水:蒸餾水=1:1  
以專用管刷或是  
棉棒洗淨導管內外壁。  
不建議浸泡於雙氧水中  
以避免損傷氣切管。

# 沖

## 步驟 3

清洗後的氣切管必須  
使用大量無菌生理鹽水  
充分沖洗乾淨。  
仔細檢視避免有任何棉絮  
等異物殘留在管壁上

# 晾

洗淨後的氣切管讓其  
自然晾乾，無須擦拭。  
存放於乾燥潔淨的  
容器內待用

## 步驟 4

- \* 除非氣切造口發炎感染，儘量避免採用雙氧水進行洗淨，因為雙氧水的成分會干擾傷口的癒合。  
如果雙氧水用於感染傷口部位，必須用無菌生理鹽水徹底清洗乾淨。
- \* 可使用氣切管專用洗滌劑或中性清潔劑洗淨，例如奶瓶清潔劑等。
- \* 每次洗淨後或使用前先必需檢視氣切管是否損傷。  
如發現有接頭脫落，管壁刮傷等狀況則需丟棄、更換新的氣切管。

氣切管使用時間不得超過29天

## 注意事項

## 五、氣切管消毒步驟




1. 將氣切管清洗乾淨(用棉花棒清洗)。



2. 水沸騰後，關閉火源，置入氣切管及支撐器。



3. 蓋上鍋蓋靜置 30 分鐘。

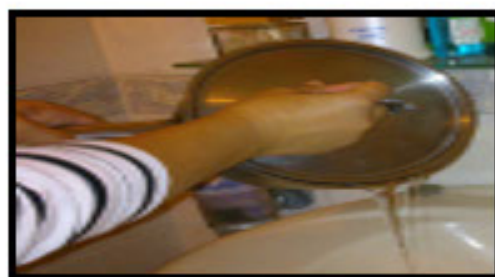

4. 蓋子勿打開狀況下將水全部倒掉。